

SYMBOLS

CE CE-Zeichen

 Temperaturbegrenzung


 Haltbarkeitsdatum

 Hersteller
EASTDENT CO., LTD

64 Gugal-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16972, Korea
Tel.: +82-31-693-5767 Fax: +82-31-693-5768
E-Mail: eastdent@east-dent.com Web: www.east-dent.com


 KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, 65760, Eschborn, Germany
Tel: +49-6196-887-170

 Nur für den professionellen Gebrauch

 Vorsicht


 Chargenbezeichnung

 Nicht wiederverwenden

 Hersteller

 Von Sonnenlicht fernhalten

 Bevollmächtigter Vertreter in der EU

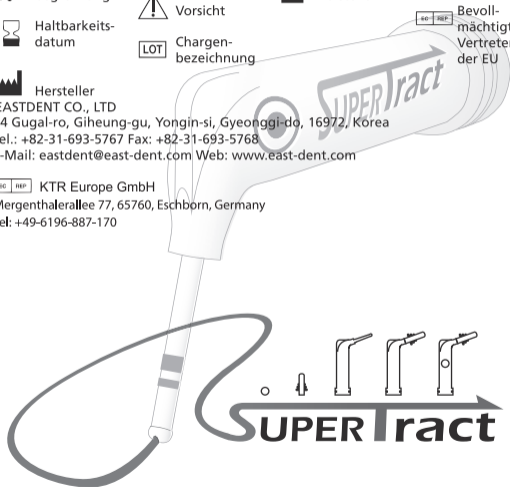

SUPERTract

BESCHREIBUNG

Supertract ist eine Retraktionspaste mit adstringierender Wirkung zur temporären Verdrängung des Zahnfleischrandes und/oder der Trocknung des Sulkus.

Supertract: Kompulen (0,5 Gramm, Einzeldosis zur Anwendung bei einem Patienten)

ANWENDUNGSGEBIETE

Supertract ist indiziert für die temporäre Verdrängung der Gingiva und/oder die Trocknung des Sulkus während klinischer Behandlungen wie:

- Abdrucknahme mit Abdruckmaterial oder digital
- Befestigung temporärer oder dauerhafter Restaurationen
- Präparation von Klasse-II- und Klasse-V-Füllungen

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG


Der Anwender muss vor der Verwendung von Supertract eine Schutzbrille aufsetzen.

Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt konsultieren, falls erforderlich.


ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

1. Supertract aus der Folienverpackung entnehmen (unmittelbar vor dem Gebrauch).
2. Eine Kompule in eine handelsübliche Dosierpistole einlegen und prüfen, ob die Kompule fest in der Dosierpistole sitzt. Verschlusskappe von der Kompulenspitze entfernen, eine kleine Menge Supertract abgeben und den Überschuss von der Kompulenspitze wischen.

3. Präparierten Zahn spülen und lufttrocknen. Kompulenspitze knapp über dem Sulkus halten und Supertract langsam applizieren, bis der Sulkus leicht überfüllt ist.
Supertract muss langsam in den Sulkus extrudiert werden, um das Material nicht unter Druck in das parodontale Gewebe zu injizieren.
4. Achten Sie darauf, eine ausreichende Menge Supertract in den Sulkus zu füllen, um die gewünschte Retraktion des Gewebes zu erreichen.
Hinweis: Bei subgingivalen Rändern und für eine maximale Ablenkung des Weichgewebes das Material mit einem Wattekügelchen in den Sulkus drücken.
5. Das Material 2 Minuten im Sulkus belassen. Die präparierte Stelle dabei trocken halten.
Hinweis: Eine zu lange Verweildauer kann zu Gewebeschäden führen.
6. Supertract kann als Alternative zu oder in Kombination mit Retraktionsfäden oder anderen Retraktionsmethoden verwendet werden.

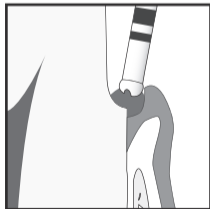

Nur **SUPERtract**

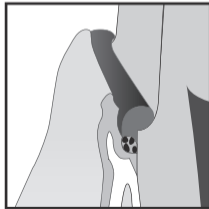

SUPERtract in
Kombination mit **Smartcord**

7. Nach Verdrängung und Trocknung der Gingiva Supertract mit einem Luft-Wasser-Gemisch unter Zuhilfenahme einer Saugvorrichtung vollständig aus dem Sulkus entfernen.
Der Patient darf das Material nicht verschlucken.
Überprüfen Sie vor dem nächsten Behandlungsschritt, ob Supertract vollständig entfernt wurde.
8. Mithilfe der eingebauten mechanischen Entleerungshilfe lässt sich die Paste vollständig aufbrauchen.
9. Supertract ist nur für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten bestimmt. Eine Kompule enthält ausreichend Material für bis zu 5 Zähne, darf jedoch nicht für mehr als einen Patienten verwendet werden.

GEGENANZEIGEN

Nicht bei Patienten mit bekannter Allergie gegen Aluminiumchlorid anwenden.

Nicht bei Patienten mit erheblicher Parodontitis oder Furkationsbefall anwenden.

VORSICHT

1. Nur für den professionellen Gebrauch.
2. Eine zu lange Verweildauer von Supertract kann zu Gewebeschäden führen.
3. Der Kontakt mit aluminiumchloridhaltiger Retraktionspaste kann zu Metallkorrosion führen. Eventuelle Reste von Supertract auf den Instrumenten sofort mit Wasser abspülen.
4. Supertract ist nur für Einzelpatienten bestimmt. Nicht bei mehreren Patienten anwenden.
5. Sonnenlicht oder nahe gelegene Wärmequellen vermeiden. Bei unsachgemäßer Lagerung verkürzt sich die Haltbarkeit.
6. Supertract nicht einnehmen und von Kindern fernhalten.

160 X 90


Front

SYMBOLS

CE mark	For professional use only	Do not re-use	Keep away from sunlight
Temperature limit	Caution	Manufacturer	Authorized representative in the EU
Use-by date	Batch code	Medical Device	

Manufacturer
EASTDENT CO., LTD
64 Guga-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16972, Korea
Tel : +82-31-693-5767 Fax : +82-31-693-5768
Mail : eastdent@east-dent.com Web : www.east-dent.com

KTR Europe GmbH
Mergenthalerallee 77, 65760, Eschborn, Germany
Tel: +49-6196-887-170




DESCRIPTION
Supertract is an astringent retraction paste for temporary displacement of the marginal gingiva and/or drying the gingival sulcus.
Supertract : 0.5 gram single-patient use, unit dose capsules.

INDICATIONS FOR USE
Supertract is indicated for temporary displacement of the gingiva and/or drying the gingival sulcus during clinical procedures such as:
- Taking impressions, either with impression material or as digital impression.
- Cementation of temporary and permanent restorations.
- Preparation of Class II and V fillings.

PRECAUTIONS FOR USE
The user must wear protective goggles before using Supertract.
If eye contact occurs, wash immediately with plenty of water and consult a physician if necessary.

GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE
1. Remove Supertract from the foil package (immediately before use).
2. Place a capsule in a commonly available dispensing gun, and check to see that the capsule is firmly seated in the dispensing gun. Remove the sealing cap from the capsule tip and dispense a small amount of Supertract from the capsule tip and wipe of the excess.



EDSTIE Rev3. 03/2022

Back

3. Rinse and air dry prepared tooth. Extrude Supertract slowly into the sulcus while maintain the capsule tip of Supertract just above the sulcus, until it is slightly overfilled with material.
Supertract should be extruded slowly into the sulcus, so as not to inject the material under pressure into the periodontal tissues.

4. Ensure you extrude sufficient Supertract into the sulcus to achieve adequate tissue retraction.
Note: For subgingival margins and maximum deflection of soft tissue, use a cotton pallet and push into sulcus.

5. Allow Supertract to remain in the sulcus for 2 minutes. Keep all moisture away from the site during this period.
Note: An overly long residence time may cause damage to tissue.

6. Supertract can be used as an alternative to or in combination with retraction cords or other retraction methods.

7. After gingival displacement and drying has been achieved, remove Supertract completely from the sulcus, using a mixture of air and water and with the aid of a suction device.
The patient must not swallow Supertract.
Examine treatment site to verify complete removal of the Supertract prior to next clinical procedure.


8. By using Push ball, paste can be used until the last drop.

9. Supertract is for single-patient use only.
Supertract contains sufficient material for up to 5 teeth, but may not be used on more than one patient.


CONTRAINDICATIONS FOR USE
Do not use on patients with known allergy to aluminum chloride.
Do not use on patients with significant periodontal disease or furcation involvement.

CAUTION

- Professional use only.
- An overly long residence time of Supertract may cause damage to tissue.
- Contact with retraction paste containing Aluminum Chloride may cause metal corrosion. Remove any residual Supertract on the instruments immediately with water.
- Supertract is for single-patient use only; do not use on multiple patients.
- Avoid sunlight or nearby heat sources. Shelf life will be reduced if not stored properly.
- Do not ingest Supertract, and keep it away from children.

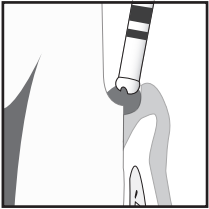

SUPERTract only

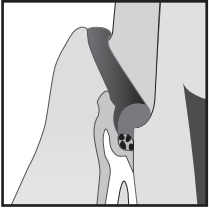

Combination with
Smartcord