

# IRRIFLEX®

## Flexible Kanüle zur Spülung des Wurzelkanalsystems

**AMERICAN**  
Dental Systems  
INNOVATIVE DENTALPRODUKTE

Flexibilität – IrriFlex® passt sich mühelos an die Anatomie selbst komplexer Wurzelkanäle an


Effizienz – Zwei seitliche Öffnungen (30G) an der Kanülen-  
spitze für gleichmäßigen Austritt der Spülflüssigkeit

Reibungsloses Erreichen der Arbeitslänge  
bei stark gekrümmten Kanälen

Luer-Lock-Verbindung und 4% Konizität

Gesamtlänge 27 mm und Tiefenmarkierungen  
bei 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm

Vollständig transparente Nadel mit weichem  
Polypropylen-Körper

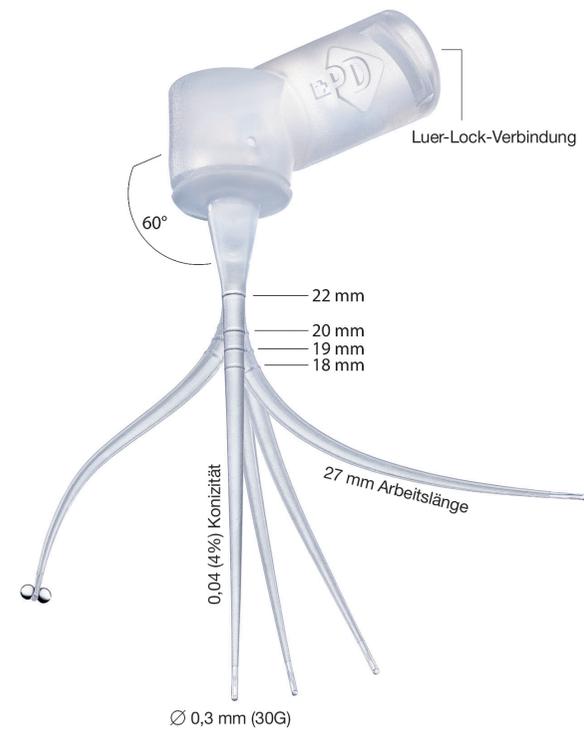

7940213

# IRRIFLEX®

Flexible Kanüle zur Spülung des  
Wurzelkanalsystems



Zum Shop  
IrriFlex®



## Technische Daten

**Kompatibel mit EDTA 17%, Hypochlorit 5,25%,  
Chlorhexidin 2%, Zitronensäure 40%**


Die Kanalspülung ist ein wichtiger Schritt der Wurzelbehandlung. Dabei ist es entscheidend, dass die Spülflüssigkeit in den Wurzelkanälen ungehindert verteilt wird. IrriFlex® sorgt für ein müheloses Absenken entlang gekrümmter Kanalwände, zudem lässt sich die Spülkanüle in der Arbeitslänge präzise platzieren.

Dank dieser Vorteile kann sich der Anwender darauf verlassen, dass sich die Spülflüssigkeit gut verteilen und tief in das System vordringen kann. Denn die Entfernung der Schmierschicht, die Ablösung des Biofilms und das Desinfizieren des Wurzelkanalsystems sind vor der Obturation wesentlich.

**Endo-Nadel 30G  
Doppelöffnung**



**IrriFlex® 30G  
Doppelöffnung**

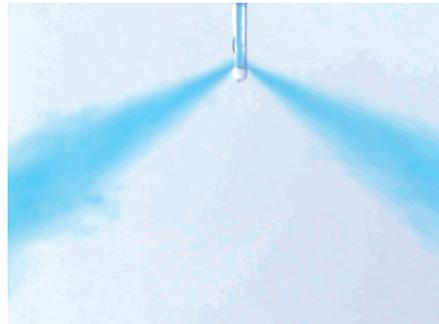

**Endo-Nadel 30G  
einseitige Öffnung**

